

Sistema de Clavos Endomedulares

CLAVO PROXIMAL DE FÉMUR PARA INYECCIÓN DE CEMENTO

INDICACIONES

Indicado para osteoporosis o cirugía de revisión.

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO DE CLAVO

El diseño anatómico garantiza un ajuste óptimo en el fémur.

El ángulo medial-lateral de 5° permite la inserción en la punta del trocánter mayor.

El clavo canulado facilita la inserción.

TORNILLO DE COMPRESIÓN DE CADERA FEMORAL-A PERFORADO

Estabilidad rotacional y angular lograda con un solo elemento.

La gran superficie y el aumento del diámetro del núcleo garantizan una compactación máxima y una sujeción óptima del hueso.

La cuchilla perforada facilita la colocación del cemento.

INSTRUMENTAL DE COLOCACIÓN ESPECÍFICO


CANAL PARA CEMENTO ÓSEO

Ajusta la profundidad de acuerdo con la medida del tornillo de compresión.

Proporciona el canal para la colocación de cemento óseo.

CÁNULA CON APERTURA LATERAL

Para colocación de cemento óseo.

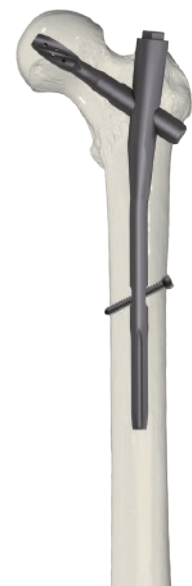

Sistema de Clavos Endomedulares

CLAVO PROXIMAL DE FÉMUR PARA INYECCIÓN DE CEMENTO

CLAVO ENDOMEDULAR PROXIMAL DE FÉMUR CON CEMENTO LARGO



CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	DIÁMETRO	LARGO
55309032	55319032	Φ9.0	340
55309035	55319035	Φ9.0	360
55309038	55319038	Φ9.0	380
55309041	55319041	Φ9.0	400
55309044	55319044	Φ9.0	420
55301034	55311034	Φ10	340
55301036	55311036	Φ10	360
55301038	55311038	Φ10	380
55301040	55311040	Φ10	400
55301042	55311042	Φ10	420
55301134	55311134	Φ11	340
55301136	55311136	Φ11	360
55301138	55311138	Φ11	380
55301140	55311140	Φ11	400
55301142	55311142	Φ11	420
55301234	55311234	Φ12	340
55301236	55311236	Φ12	360
55301238	55311238	Φ12	380
55301240	55311240	Φ12	400
55301242	55311242	Φ12	420

TORNILLO DE BLOQUEO-A



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO
55330026	Φ5.0	26
55330028	Φ5.0	28
55330030	Φ5.0	30
55330032	Φ5.0	32
55330034	Φ5.0	34
55330036	Φ5.0	36
55330038	Φ5.0	38
55330040	Φ5.0	40
55330042	Φ5.0	42
55330044	Φ5.0	44
55330046	Φ5.0	46
55330048	Φ5.0	48
55330050	Φ5.0	50
55330052	Φ5.0	52
55330054	Φ5.0	54
55330056	Φ5.0	56
55330058	Φ5.0	58
55330060	Φ5.0	60
55330062	Φ5.0	62
55330064	Φ5.0	64
55330066	Φ5.0	66
55330068	Φ5.0	68
55330070	Φ5.0	70
55330072	Φ5.0	72
55330074	Φ5.0	74
55330076	Φ5.0	76
55330078	Φ5.0	78
55330080	Φ5.0	80

CLAVO ENDOMEDULAR PROXIMAL DE FÉMUR CON CEMENTO CORTO



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO	CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO
55309020	Φ9.0	200	55301120	Φ11	200
55309023	Φ9.0	240	55301124	Φ11	240
55301020	Φ10	200	55301220	Φ12	200
55301024	Φ10	240	55301224	Φ12	240

TORNILLO DE COMPRESIÓN-A PERFORADO



CÓDIGO	LARGO	CÓDIGO	LARGO
55329070	70	55329100	100
55329075	75	55329105	105
55329080	80	55329110	110
55329085	85	55329115	115
55329090	90	55329120	120
55329095	95	55329125	125

INSTRUMENTAL PARA TORNILLO DE COMPRESIÓN-A PERFORADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
13031027	CANAL PARA CEMENTO ÓSEO	13031028	CÁNULA CON APERTURA LATERAL



TAPÓN FINAL



CÓDIGO	LARGO
55350000	0
55350005	5
55350010	10
55350015	15